

MANTENIMIENTO

Para asegurar un buen rendimiento y la mayor seguridad, siga las siguientes instrucciones :

- Limpie el rollator con detergente disolvente en agua y seque con un paño suave. Mantenga las ruedas limpias.
- Verifique los tornillos y tuercas están debidamente ajustadas.
- Si su rollator no está funcionando perfectamente - contacte con su distribuidor inmediatamente. Nunca utilice un rollator defectuoso, y no lo intente reparar usted mismo.

NOTA! Únicamente para ser utilizado como un soporte para caminar. Máximo peso de usuario **P550/2 ACTIO 2 - P550/2-L ACTIO 2-L 130kg.**


INVACARE no acepta ninguna responsabilidad por adaptaciones, reparaciones inadecuadas, etc que estén fuera de su control.

INSTRUCCIONES PARA LA DESTRUCCION DEL PRODUCTO Y SU EMBALAJE:


Cuando el producto no pueda ser utilizado, éste y sus accesorios, así como también, el material de embalaje deberán ser correctamente desechos.

Toda la información técnica de importancia, la podrá encontrar en la pegatina del **P550/2 ACTIO 2 - P550/2-L ACTIO 2-L**.

- 1: Código de producto
- 2: Nombre del producto
- 3: Número de lote
- 4: Fecha de fabricación
- 5: Peso max. de usuario
- 6: NOTA! mire el manual de usuario
- 7: Rollator para interiores
- 8: Ancho máx. del rollator
- 9: Nombre del fabricante

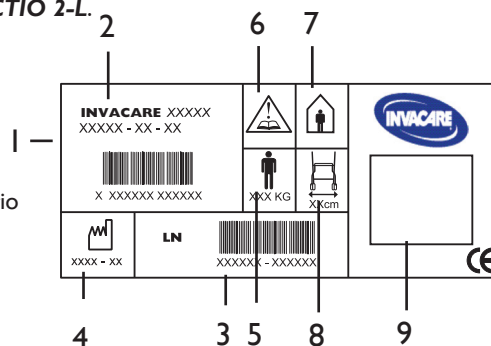

- | | |
|---|-----------|
| A | 53 cm |
| B | 74-100 cm |
| C | 41 cm |
| D | 38 cm |
| E | 55 cm |
| F | 63 cm |

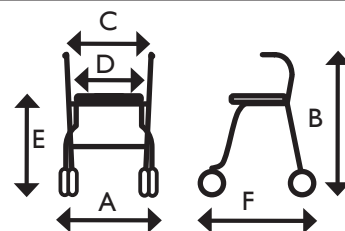

Diámetro de las ruedas frontales: 11 cm
Peso sin accesorios: 5 kg




Fabricante:
INVACARE REA AB, Box 200, SE-343 75 DIÖ, SWEDEN
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 99

Entidad de venta:
Invacare SA, c/Areny s/n, Poligon Industrial de Celrà, E-17460 Celrà (Girona)
TEL (34) (0)972 49 32 00, FAX (34) (0)972 49 32 20
contactsp@invacare.com



P550/2 ACTIO 2 P550/2-L ACTIO 2-L

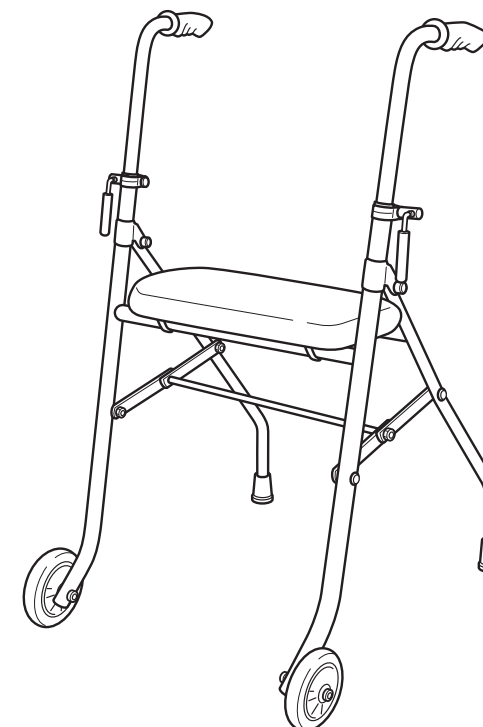

MANUAL DE UTILIZACION

Lea cuidadosamente este manual de utilización antes de utilizar el producto.

PROPOSITO

Este rollator, tiene como único propósito, el ser una ayuda para caminar, todo uso diferente a este tiene riesgo de provocar daños o lesiones.

El rollator esta adaptado para uso únicamente en interiores.



1514380-3 100427

ES MANUAL DE UTILIZACION

SEGURIDAD



- El rollator está adaptado únicamente para uso en interiores.
- Está prohibido ponerse de pie sobre el rollator.
- Cuando utilice el andador este deberá estar siempre completamente desplegado y bloqueado. **NOTA!** debe utilizarse únicamente como rollator.
- Tenga mucho cuidado cuando camine en superficies inclinadas.
- No suba o baje escalones utilizando como apoyo el rollator.
- No utilice el rollator como un escalón.
- Utilícelo con precaución cuando coloque elementos pesados en la cesta.
- Únicamente la cesta puede transportar peso (max. 5kg.)
- No se debe apoyar en el borde frontal del asiento, porque el asiento podría abrirse
- Las empuñaduras y sus barras no deben girarse hacia afuera, ya que esto reduce la estabilidad lateral del rollator.

EMPUÑADURAS

NOTA! Cuando se utilice el rollator, los puños deben colocarse hacia atrás. Bajo ninguna circunstancia se deben orientar hacia afuera.







Para ajustar la altura de las empuñaduras :

- Suelte ligeramente las palancas de ajuste y ubique los tubos a la altura deseada. **NOTA!** : los puños nunca deben ubicarse por arriba de su posición más alta, indicada por una marca en los tubos.
- Ajuste con las palancas de ajuste. Las palancas deberán apuntar hacia abajo para no interferir en la utilización del rollator.
- Antes de utilizar el rollator, confirme que las dos empuñaduras están a la misma altura. Normalmente las empuñaduras deben colocarse a la altura de las muñecas de las manos.

MONTAJE

Antes de montar el rollator retire las tapas plásticas de los tubos si las hubiera.

1. Abra el rollator en posición de utilización (gráfico).
2. Coloque las palancas de ajuste de altura y sus tornillos. Las palancas deben ser colocadas en el exterior del tubo. Confirme que los tornillos encajan correctamente en el agujero cuadrado del accesorio del tubo.
3. Inserte los tubos de las empuñaduras en los tubos laterales del rollator y ajuste con las palancas. Las palancas de ajuste deben permanecer hacia abajo para no molestar durante su utilización.

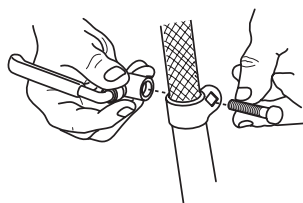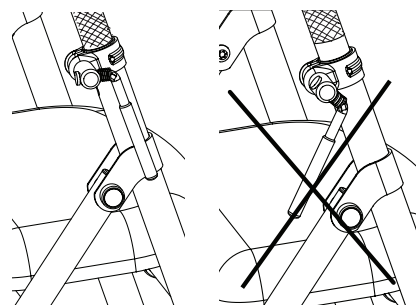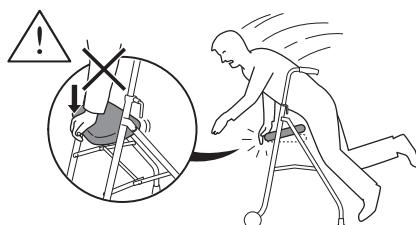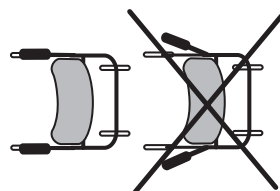


POSICION DE UTILIZACIÓN

Abra el rollator en la posición de funcionamiento y ancle el mecanismo de plegado presionando hacia abajo (ver imagen).



NOTA! Compruebe siempre el correcto anclaje del mecanismo de plegado.

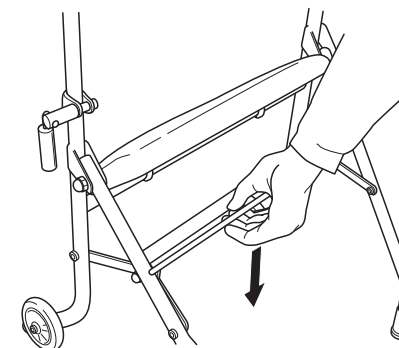

PLEGADO

Tire del mecanismo de plegado hacia arriba (ver imagen).



NOTA! Tenga cuidado de no pillarse los dedos entre la parte delantera y trasera del rollator.

